




Catalogue

TỔNG QUÁT





VINHA
our dental practice
T SELLER

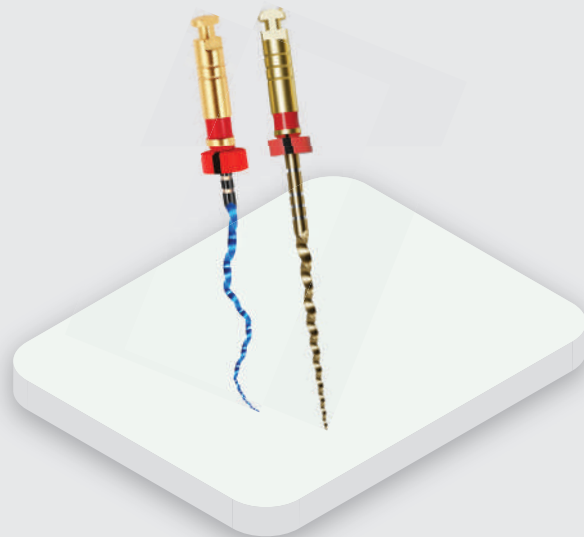

HỆ THỐNG TRÂM MÁY MG3

📍 Trung Quốc

➤ MÔ TẢ CHUNG

- Màu sắc: Xanh (Blue); Vàng (Gold)
- Nhiệt độ hấp tiệt trùng: $\leq 134^{\circ}\text{C}$
- Chiều dài: 19mm (Starter); 21mm; 25mm (P1-G3)
- Torque: 2.0N/cm (Starter: 3.0N/cm)
- Tốc độ: 300 - 350rpm

Kích thước	Đường kính chóp	Độ thuận	Mã sản phẩm MG3 Blue	Mã sản phẩm MG3 Gold
● Starter	20	0.1	MG3BLUESV_19	MG3GOLDSV_19
○ P1	15	0.03	MG3BLUEPX_21 MG3BLUEPX_25	MG3GOLDPX_21 MG3GOLDPX_25
● P2	20	0.04	MG3BLUEG1_21 MG3BLUEG1_25	MG3GOLDG1_21 MG3GOLDG1_25
● G1	25	0.04	MG3BLUEG2-25/.04_21 MG3BLUEG2-25/.04_25	MG3GOLDG2X_21 MG3GOLDG2X_25
● G2	25	0.06	MG3BLUEG2-25/.06_21 MG3BLUEG2-25/.06_25	MG3GOLDG2_21 MG3GOLDG2_25

Lưu ý: G3 30/.04 đặt hàng trước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Thăm dò và đo chiều dài với trâm tay K10
- 2 Tạo lỗ 1/3 trên ống tuỷ với 20/.10
- 3 Tạo đường trượt với 15/.03
- 4 Tạo độ rộng lần lượt với 20/.04, 25/.04, 25/.06
tùy theo kích thước ống tuỷ
Lưu ý: 25/.04: ống tuỷ cong, hẹp
25/.06: ống tuỷ rộng, thẳng
- 5 Kết thúc trám bít với côn tương ứng

Đóng gói: Size lẻ (6 trâm/vỉ)
Size hỗn hợp (5 trâm/vỉ)

399.000Đ/1 VỈ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Đi cùng với Côn chính (không vạch)

Độ thuận 0,4 - 0,6	Chiều dài 28mm	Size 20, 25, 30, 35, 40 20, 25, 30, 35 F1, F2, F3, F4, F5	
Đi cùng với thước đo nội nha Dùng chung cho hệ thống Protaper Đóng gói: 60 cái/hộp			
THƯỚC ĐO NỘI NHA			
			
Đóng gói: 1 cái/hộp 62.000Đ			Đóng gói: 1 cái/hộp 1.100.000Đ

HỆ THỐNG TRÂM MÁY TG6 & MTF

Trung Quốc

MÔ TẢ CHUNG

- Nhiệt độ hấp tiệt trùng: $\leq 126^{\circ}\text{C}$
- Tiêu chuẩn: CE/ISO/FDA/FSC
- Chiều dài: 19mm (V0); 21mm; 25mm (V1-T5)

	TG6	MTF
Màu sắc	Vàng	Bạc - Niti không xử lý nhiệt
Torque	1.5N/cm - 3.0N/cm	1.5N/cm - 5.0N/cm
Tốc độ	250-350 rpm	300-375 rpm



(Có trâm tay)


TG6:
Chống mài theo
chu kỳ cao.
MTF: Độ cắt tốt

Kích thước	Đường kính chóp	Độ thon	Mã sản phẩm TG6	Mã sản phẩm MTF
● V0	19	0.04	TG6FILEV0_19	MTFSX_19_ROTARY
● V1	18	0.02	TG6FILEV1_21 TG6FILEV1_25	MTFS1_21_ROTARY MTFS1_25_ROTARY
○ V2	20	0.04	TG6FILEV2_21 TG6FILEV2_25	MTFS2_21_ROTARY MTFS2_25_ROTARY
● T1	20	0.07	TG6FILET1_21 TG6FILET1_25	MTFF1_21_ROTARY MTFF1_25_ROTARY
● T2	25	0.08	TG6FILET2_25 TG6FILET2_21	MTFF2_21_ROTARY MTFF2_25_ROTARY
● T3	30	0.09	TG6FILET3_25 TG6FILET3_21	MTFF3_21_ROTARY MTFF3_25_ROTARY

Lưu ý: T4 40/.06 và T5 50/.05 đặt riêng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thăm dò và xác định vị trí ống tuỷ với K10
- Tạo lỗ 1/3 lần lượt các ống tuỷ với V0 19/.04
- Tạo đường trượt với V2 20/.04
- Sửa soạn với T2 25/.08
- Thử Côn cho phù hợp với ống tuỷ

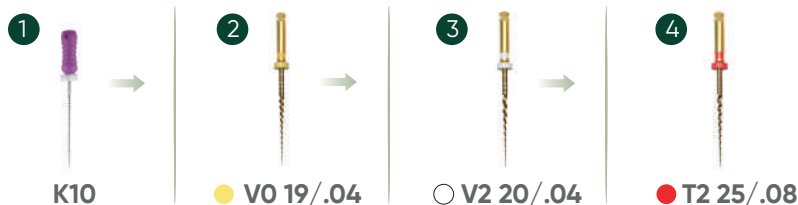

Đóng gói: 6 trâm/vỉ (có bán vỉ theo từng kích thước)

385.000Đ/1 VỈ

Ký hợp đồng - Giá ưu đãi áp dụng ngay

HỆ THỐNG TRÂM ĐIỀU TRỊ LẠI RETREATY KIT

📍 Trung Quốc

➤ MÔ TẢ CHUNG

- Chất liệu:
 - Bull-Y/shap-Y1/shap-Y2 xử lý nhiệt vàng
 - Skinn-Y không xử lý nhiệt
 - Shap-Y3 xử lý nhiệt xanh
- Nhiệt độ hấp tiệt trùng: 134°C
- Lực torque: 1,5Ncm
- Tốc độ quay: 350~500 vòng/phút
- Đóng gói: 5 trâm/hộp



**Giải pháp
trâm chuyên biệt
cho các ca
điều trị lại**

Mã	Đường kính chóp	Độ trơn	Chiều dài		
			21mm	25mm	31mm
● Bull	27	0.05	✓		
● SkinnY	25	0.04	✓	✓	✓
● ShapY1	20	0.05	✓	✓	✓
● ShapY2	25	0.05	✓	✓	✓
● ShapY3	30	0.05	✓	✓	✓

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Đánh giá trước điều trị & tiếp cận buồng tủy

X-quang đánh giá hình thái ống tủy. Mở tủy, bộc lộ và xác định miệng ống tủy

2 Loại bỏ vật liệu trám bít cũ

Bull: loại bỏ GP vùng cổ, tạo loe



Skinny: loại bỏ GP 2/3 giữa, tạo hình bước đầu



3 Xác định chiều dài làm việc

Thực hiện sau khi đã loại bỏ phần lớn GP

4 Tạo hình ống tủy

Sơ bộ: Shapy1 – Shapy2



Hoàn tất 1/3 chóp: Shapy3 (loại bỏ GP còn lại)



5 Bơm rửa & kiểm soát nhiễm khuẩn

Thực hiện xuyên suốt (NaOCl ± EDTA)

399.000Đ/1 VỈ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

TRÂM TAY

 Trung Quốc

K FILE/ H FILE




- Chiều dài: 21mm/25mm
- Kích thước: 0.08mm, 0.1mm, 0.15-0.4mm

60.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

REAMER

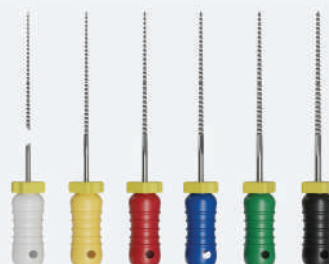

- Chiều dài: 21mm/25mm
- Kích thước: 0.08mm, 0.1mm, 0.15-0.4mm

102.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

C FILE




- Chiều dài: 21mm/25mm
- Kích thước: 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm

150.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

GATE DRILLS

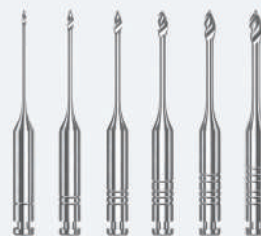

- Chiều dài: 28mm, 32mm
- Kích thước: 0.7mm, 0.9mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.7mm

170.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MÔ TẢ

- Chất liệu: Thép không gỉ
- Nhiệt độ tiệt trùng: $\leq 134^{\circ}\text{C}$
- Đóng gói: 6 trâm/hộp

BẢO QUẢN

- Tránh bảo quản ở nhiệt độ cao, độ ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp
- Tránh xa chất lỏng
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng
- Không làm hỏng hoặc tạo lỗ kim trên bao bì
- Không cất giữ dụng cụ dưới đèn diệt khuẩn để tránh sự xuống cấp

ĐÊ CAO SU

 **Trung Quốc**

MÔ TẢ CHUNG

- Mủ cao su Malaysia, bền, ôm sát, không gây kích ứng, hút dịch tốt
- Kích thước:
 - RD02 (6x6') 152*152mm
 - RD03 (5x5') 127*127mm



Mã: RD03 (52 cái) RD02 (36 cái)
Đóng gói: 36 cái/túi, 52 cái/túi

310.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BỘ ĐẶT ĐÊ

 **Pakistan**

MÔ TẢ CHUNG

Bộ sản phẩm bao gồm:

- 1 khung căng đê
- 1 kềm bấm lỗ
- 1 kềm đặt clamp
- 8 kẹp đê cao su bao gồm các số 0; 3; 4; 8A; 12A; 13A; 27; 212



Mã: NEXTON-2KX1

1.070.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

VẬT LIỆU TRÁM BÍT SINH HỌC ONE FIL (MTA 40%)

SEALER



Trám bit ống tuý

1.790.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Thời gian đông hoàn toàn 3.5 giờ*

- ★ Độ chảy 26mm
- ★ Độ cản quang 9mmAl
- ★ Kháng khuẩn >13pH

PUTTY INJECTABLE



Trám khối ống tuý
(Bơm trực tiếp)

1.790.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Thời gian đông khởi phát <5 phút

Thời gian đông hoàn toàn 1 giờ*

- ★ Độ cản quang 10mmAl
- ★ Kháng khuẩn >12pH

PUTTY



Trám ngược

1.590.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Thời gian đông khởi phát <5 phút

Thời gian đông hoàn toàn 1 giờ*

- ★ Độ cản quang 10mmAl
- ★ Kháng khuẩn >12pH

- Trám bit ống tuý (Single Cone)
- Bơm trực tiếp vào ống tuý
- Đóng gói 1 tuýp: 2g

- Trám khối ống tuý (Monoblock)
- Điều trị thủng sàn
- Tạo nút chặn chóp
- Điều trị tuỷ buồng
- Che tuỷ trực tiếp & gián tiếp
- Bơm trực tiếp vào ống tuý/Nhồi
- Đóng gói 1 tuýp: 0.5g/1 Hộp: 4 tuýp

- Điều trị thủng sàn
- Tạo nút chặn chóp
- Điều trị tuỷ buồng
- Che tuỷ trực tiếp & gián tiếp
- Trám ngược trong phẫu thuật cắt chóp
- Nhồi
- Đóng gói 1 tuýp: 0.25g/1 Hộp: 4 tuýp

THÀNH PHẦN

- Các hợp chất Canxi Silicat
- Zirconium oxit
- Chất làm đặc
- Độ hoà tan <1

BẢO QUẢN

 15–25°C

 Tránh rơi, va đập



Đậy nắp ngay sau khi dùng



Tránh ánh nắng trực tiếp



Bảo quản trong túi ziplock

*Lưu ý: Tuỳ vào từng bệnh nhân, thời gian đông hoàn toàn có thể lên tới 24 giờ. Chống chỉ định Không sử dụng nếu sản phẩm hư hỏng

MUA 5 TẶNG 1

MUA 10 TẶNG 3

MUA 20 TẶNG 10



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

A KỸ THUẬT ĐƠN CÔN (SINGLE CONE)

- 1 Sửa soạn, bơm rửa ống tủy đúng tiêu chuẩn nội nha hiện đại
- 2 Thấm khô - thử côn
- 3 Bơm Sealer ½ ống tủy (*), rồi dàn đều lên thành ống tủy
- 4 Cho 1 ít sealer lên đầu côn, rồi nhồi nhẹ vào lòng ống tủy đến hết chiều dài làm việc. (**)
- 5 Cắt và nhồi côn vào miệng ống tủy
- 6 Chụp X-quang kiểm tra



LƯU Ý: (*) Không bơm tràn lên miệng lỗ ống tủy. (**) Xoay côn nhẹ để loại bọt khí

B KỸ THUẬT TRÁM KHỐI ỐNG TỦY (MONOBLOCK)

- 1 Sửa soạn và bơm rửa ống tủy đúng tiêu chuẩn nội nha hiện đại
- 2 Bơm nhẹ One-fil Injectable vào ống tủy cách WL 2 mm, và rút dần lên
- 3 Chụp X-quang kiểm tra độ bít kín
- 4 Tiếp tục trám bít đến miệng lỗ ống tủy, tránh tạo bọt khí



LƯU Ý: Lau vật liệu dư bằng bông ẩm, dùng cọ bond nhỏ nhồi chặt vật liệu ở 1/3 trên ống tủy.

C CHE TỦY TRỰC TIẾP

- 1 Làm sạch
- 2 Cầm máu điểm lộ tủy với NaOCl > 1% trong 5 phút
- 3 Nếu máu ngưng chảy, đặt vật liệu trám trực tiếp lên điểm lộ tủy dày ít nhất 2mm
- 4 Chờ vật liệu đông ban đầu (~ 5 phút) rồi trám lại thân răng



D BÍT LỖ THÙNG SÀN

- 1 Đặt đê, làm sạch và lấy bỏ mô răng nhiễm
- 2 Khử khuẩn lỗ thủng và cầm máu với gòn tẩm NaOCl 1.5% trong 1 phút
- 3 Bơm hoặc nhồi vật liệu trám đầy lỗ thủng và cố định với gòn
- 4 Một ngày sau, kiểm tra vật liệu vá. Tiếp tục điều trị nội nha khi vật liệu đã đông cứng hoàn toàn



VẬT LIỆU TRÁM BÍT ỐNG TUYỬ ANY-SEAL



Đóng gói: 10gram/1 tuýp

Mã: 503-1

590.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

 **MUA 5**

TẶNG 1

 **MUA 10**

TẶNG 3

CÁCH DÙNG

1. Sửa soạn, bơm rửa ống tủy đúng tiêu chuẩn nội nha hiện đại
2. Thấm khô – thử côn
3. Bơm vật liệu ½ ống tủy (*), rồi dàn đều lên thành ống tủy
4. Cho 1 ít vật liệu lên đầu côn, rồi nhồi nhẹ vào lòng ống tủy đến hết chiều dài làm việc. (**)
5. Cắt và nhồi côn vào miệng ống tủy
6. Chụp X-quang kiểm tra

Chảy tối ưu,
cản quang cao.
Thích hợp trám bít
lên nhiệt sống
liên tục



Hàn Quốc

THÀNH PHẦN

- ✓ Nhựa oligomer Epoxy/
- ✓ Etylen glycol salicylat
- ✓ Bao gồm oxit zirconi/
- ✓ Canxi photphat

ĐẶC ĐIỂM

- ✓ Trám bít với khả năng chảy tối ưu
- ✓ Có khả năng cản quang
- ✓ Tương tự với sản phẩm AH plus
- ✓ Thời gian làm việc: 1 giờ

BẢO QUẢN



15–25°C



15–60%



Đậy nắp ngay sau khi dùng



Tránh ánh nắng trực tiếp



Bảo quản trong túi ziplock

LƯU Ý: (*) Không bơm tràn lên miệng lỗ ống tủy. (**) Xoay côn nhẹ để loại bọt khí

CALCIUM HYDROXIDE ANY-PASTE



Đóng gói: 2gram/1 tuýp
Kèm theo 10 đầu bơm
Mã: 505-1

370.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay


**MUA 5
TẶNG 1**


**MUA 10
TẶNG 4**

CÁCH DÙNG

1. Sửa soạn và bơm rửa ống tủy
2. Bơm nhẹ vật liệu vào ống tủy cách WL 2 mm, và rút dần lên
3. Chụp X-quang kiểm tra độ bít kín
4. Tiếp tục trám bít đến miệng lỗ ống tủy, tránh tạo bọt khí

Calcium Hydroxide
trộn sẵn,
có tính cản quang

 **Hàn Quốc**

THÀNH PHẦN

- ✓ Calcium Hydroxide
- ✓ Bari Sulfate
- ✓ Hydroxyapatite

ĐẶC ĐIỂM

- ✓ Tiêu diệt biofilm và vi khuẩn trong ống ngà
- ✓ Loại bỏ mô tủy còn sót trong ống tủy

BẢO QUẢN

 15–25°C  15–60%

 Đậy nắp ngay sau khi dùng

 Tránh ánh nắng trực tiếp

 Bảo quản trong túi ziplock

LƯU Ý: Lau vật liệu dư bằng bông ẩm, dùng cọ bond nhỏ nhồi chặt vật liệu ở 1/3 trên ống tủy.

THUỐC NHUỘM MÀU ỐNG TỬY CANAL SEEK



Đóng gói: 3ml/1 tuýp
Mã: 507

390.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Dung dịch xanh
metylen phát hiện
lỗ ống tủy, nứt răng ngà
nhiễm khuẩn



Hàn Quốc

THÀNH PHẦN

- ✓ Dung dịch xanh metylen,
- ✓ Propylen glicol
- ✓ Nước Ph. eur

CÁCH DÙNG

- Làm sạch và khô sau đó đặt Canal Seek rồi rửa sạch

BẢO QUẢN



15–25°C



15–60%



Đậy nắp ngay sau khi dùng



Tránh ánh nắng trực tiếp



Bảo quản trong túi ziplock



	MD Solution EDTA	Endo Gel	Endo Cream
	 Mã: 506-1 300.000Đ Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay	 Mã: 501-1 240.000Đ Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay	 Mã: 502-1 240.000Đ Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay
Thành phần	Dung dịch EDTA 18 %. Axit EDTA dạng lỏng	EDTA 18% dạng gel	EDTA 18% Dạng kem
Đặc điểm	- Bôi trơn dạng lỏng, dễ dàng loại bỏ lớp smear layer thâm nhập vào ống tuỷ nhỏ hẹp - Dùng khi chạy trâm và bơm rửa cuối cùng.	- Làm mềm ngà, tăng tốc độ tạo hình - Độ chảy tốt, giúp ngấm sâu vào thành ống tuỷ	- Độ chảy: đặc, giúp kiểm soát tốt hơn
Cách dùng	Cách 1: Bôi trơn ống tuỷ trước khi chạy trâm Cách 2: Siêu âm 30s sau khi kết thúc sửa soạn ống tuỷ	<i>Luôn sử dụng trước khi thăm dò hoặc sửa soạn ống tuỷ</i>	
Đóng gói	100ml/1 chai	9gr/1 tuýp	9gr/1 tuýp
Bảo Quản	- Nhiệt độ: 15–25°C - Độ ẩm: 30-70% - Đậy nắp ngay sau khi dùng - Tránh ánh nắng trực tiếp		

MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY ZR AUTOMOTOR

Trung Quốc

MÔ TẢ CHUNG

- Hệ thống: Quay liên tục & Chuyển động quay qua lại
- Màn hình LCD Kỹ thuật số điều chỉnh dễ dàng, ổn định

- Lực Torque tối đa có thể đạt được 5 Ncm
- Trọng lượng: 144g

Thiết kế không dây.
Tích hợp sẵn
với 8 chế độ.
Đầu khuấy quay
360°.

Dây sạc



Thân máy



Đế sạc



Đầu micromotor



Diễn giải kí hiệu

RPM	Cài đặt tốc độ
Ncm	Cài đặt Torque
	Chuyển động theo chiều kim đồng hồ
	Chuyển động ngược chiều kim đồng hồ
	Chuyển động xoay qua lại

Mã: ZR-AUTOMOTOR

8.900.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Bảo Hành:

Thân + Pin: 11 tháng,
Đầu máy: 5 tháng, Màn hình: 1 tháng

Bắt đầu và tạm dừng chế độ

Khi máy đã khởi động nguồn, nhấn ① để bắt đầu chế độ xoay và nhấn ① để dừng chế độ xoay

Khởi động và tắt nguồn

Nhấn ① để khởi động nguồn

Nhấn giữ S và ① để tắt nguồn

Thiết bị sẽ tự động tắt sau 5 phút không thực hiện thao tác

Sạc thiết bị

Khi sạc đầy, biểu tượng sẽ hiển thị và rút dây sạc ngay khi hoàn thành quá trình sạc pin

MUA 1 MÁY TẶNG 2 TRÂM MG3

MUA 45 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY ZR AUTOMOTOR

MÁY ĐỊNH VỊ CHÓP APEX LOCATOR

Trung Quốc

Màn hình
3.7 inch

Bộ pin: 4.5V, 3 pin AAA
(Pin sử dụng được 3-4 tháng)

Kích thước:
80*60*55mm


Khối lượng: 75.5gr




5.890.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

1 Kẹp trâm vào đầu kẹp trâm

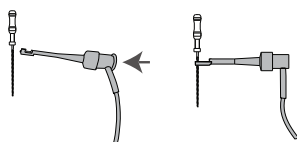


2 Nối kẹp môi với môi dưới của bệnh nhân

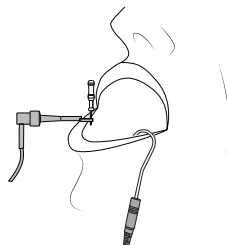

3 Đưa kẹp trâm ở B1 vào vị trí ống tuý đang điều trị và quan sát dải số
Lưu ý: Khi đến chóp, máy sẽ có tiếng bíp liên tục

Bảo Hành: 11 tháng gồm
(Thân + Pin + Màn hình + Dây đo)

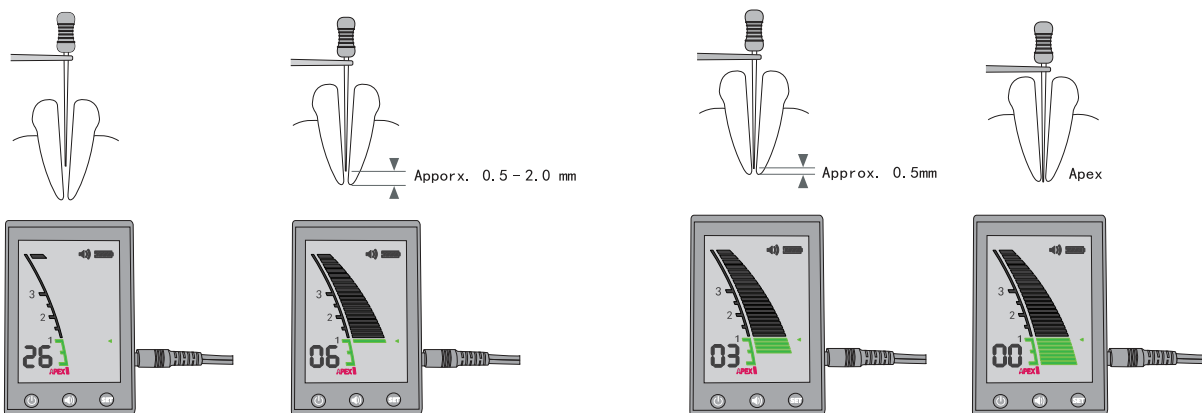

MUA COMBO MÁY PROPEX + ZR AUTOMOTOR VỚI 10.990.000Đ

MUA 65 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY PROPEX + ZR AUTOMOTOR

MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY TÍCH HỢP ĐỊNH VỊ BR RAP

 Trung Quốc

Động cơ không chổi than:

- Hạn chế tối đa tiếng ồn và độ rung
- Vận hành êm ái
- Hiệu suất cao

MÔ TẢ CHUNG

Dây sạc



Thân máy



Đế sạc



Đầu khuấy

(Tặng 1 ống bọc silicon bảo vệ)



- Đầu khuấy xoay 360° – tỷ số truyền 6:1: Linh hoạt theo vị trí răng
- Màn hình OLED kỹ thuật số
- Tốc độ 100–1200 rpm, Torque tối đa 5 Ncm
- Pin 1500mAh dung lượng lớn

17.900.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CÔNG DỤNG

- Tạo hình ống tuỷ với trâm xoay và đánh giá chiều dài làm việc
- Kiểm soát can thiệp tốt đối với ống tuỷ hở dài, tránh việc sửa soạn quá mức

LƯU Ý

- Do có dòng điện truyền trong môi trường miệng để đo đạc chiều dài làm việc. Nên khuyến cáo không sử dụng đối với các bệnh nhân có vấn đề tim mạch hoặc có máy tạo nhịp, ốc tai điện tử.

MUA 1 MÁY TẶNG 5 TRÂM MG3 + 1 CONE

MUA 80 TRÂM MG3 TẶNG 1 MÁY BR RAP

MÁY NỘI NHA KHÔNG DÂY TÍCH HỢP ĐỊNH VỊ ENDO MASTER

📍 Trung Quốc

29.000.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay




Tích hợp motor, định vị chóp, màn hình lớn và quản lý protocol giảm cài đặt lặp lại và hạn chế nhầm lẫn số

Bảo Hành:

Thân + Pin: 11 tháng

Đầu máy: 5 tháng, Màn hình: 1 tháng

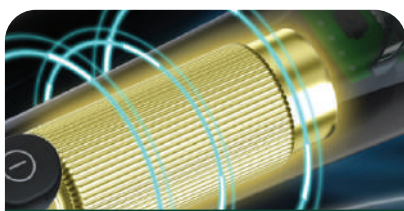

Dải tốc độ 100–3000 RPM và lực torque 0,4–5,0 Ncm, hiệu suất mạnh mẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu điều trị.




Màn hình cảm ứng IPS 5 inch lớn, hiển thị rõ nét kết hợp thao tác cảm ứng nhạy bén.




Trang bị hệ thống đèn báo trực quan cùng giao diện thân thiện.



Nhấn đúp nút nguồn để chuyển đổi giữa các chế độ trầm.

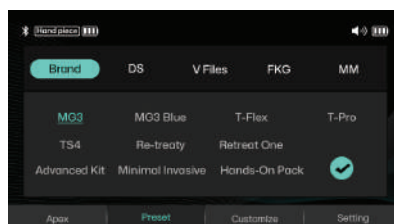

Nhấn vào (1) để truy cập danh sách hệ thống trầm nội nha.

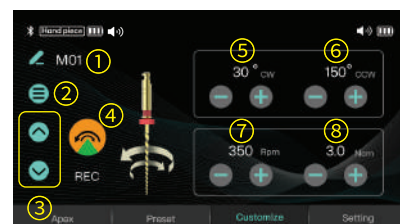


Chọn chế độ quay: Quay thuận, quay nghịch, chuyển động qua lại, chế độ thích ứng.

MÁY CẮT VÀ NHÉT CÔN GP Easy II

Đài Loan

Cắt, làm mềm, tan chảy côn trong 2 giây chỉ với 1 lần chạm.

Quét QR để Xem HDSD

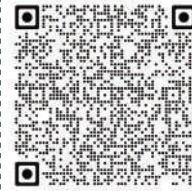

Mã: APGPH

9.900.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Bảo Hành:

Máy: 1 năm, Pin + Đầu Tips: 6 tháng

Dây sạc Bộ nguồn



Bộ pin: 4.5V



Để sạc



2 đầu tuýp




Đo chiều dài ống tuý và chọn côn GP phù hợp




Đặt côn GP với sealer để giúp côn dính chặt vào phần chóp của ống tuý



Cắt đoạn côn GP thừa trên miệng ống tuý

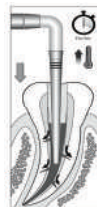

Nhấn giữ nút 2 giây và rút tip nhẹ nhàng

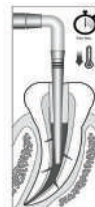

Thả nút, chờ GP chảy và ổn định



Nhấn giữ nút 2 giây và rút tip nhẹ nhàng



Làm nóng lần cuối, nén dọc để GP lấp kín ống tuý & ống phụ

COMPOSITE ĐẶC ANYCOM

Hàn Quốc



Đóng gói: 1 tuýp 4g

Mã: 301-2 (A1, A2)

250.000Đ/GÓI

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

**MUA 10
TẶNG 1**

**MUA 20
TẶNG 5**

- Cứng chắc hơn nhờ thành phần Zirconia
- Công nghệ Nano-hybrid
- Độ sâu quang trùng hợp: 2.5mm (10 giây)

CÔNG DỤNG

- Trám xoang I-V
- Trám trực tiếp xoang I, II, V răng sau
- Trám trực tiếp xoang III, IV, V răng trước
- Sửa chữa veneer
- Màu sắc: A1, A2, A3, A3.5, B1



COMPOSITE LỎNG ANYCOM FLOW

Hàn Quốc



Đóng gói: 1 tuýp 2g, 2 tuýp/ gói

Mã: 306-2 (A2, A3)

460.000Đ/GÓI

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

**MUA 8
TẶNG 2**

**MUA 20
TẶNG 6**

- Cứng chắc hơn nhờ thành phần Zirconia
- Độ sâu quang trùng hợp: 3mm (10 giây)

CÔNG DỤNG

- Phục hồi xoang III-V
- Nền/ lót trong phục hình xoang I, II
- Trám bít hố rãnh
- Màu sắc: A1, A2, A3



ETCHING ANY-ETCH

📍 **Hàn Quốc**

- 10 giây cho ngà, 15 giây cho men
- Nồng độ 37%



Đóng gói: 3ml, 5 tuýp/gói

Mã: 304

59.000Đ/TUÝP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Giúp tạo công thức etching tốt
- Chất etch dạng kem tránh xói mòn
- Có cả 2 loại dành cho ngà và men

Số công bố: 7060NK/BYT-TB-CT

AT01L AT01S

ĐẦU CỌ ETCHING

Đầu cọ nhỏ mịn, đều đặn, chắc chắn, không bị tua mòn trong quá trình sử dụng.

Đóng gói: 100 cái/túi

AT01L: size: 8-9mm | AT01S: 5-6mm



83.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BH01

CÁN CỌ ETCHING

Tay cầm có thể uốn cong, bề mặt nhẵn, cầm thoải mái hơn, đầu cọ có thể thay thế, sử dụng an toàn.

Đóng gói: 50 cái/túi

Size: 142*13*6mm



412.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MATRIX BANDS (ĐAI TRÁM KIM LOẠI)

MÔ TẢ CHUNG

- Chất liệu thép không gỉ.
- Độ dày 0.035mm.

Mã	Kích thước
SC0501L	13,7*6,8mm
SC0502M	13*5,6mm
SC0505M	12,5*6,7mm
SC0503S	11,7*4,8mm
SC0504L	14*9mm
SC0506S	11,5*5mm



 **Trung Quốc**

Đóng gói: 50 cái/hộp

412.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

RESIN MATRIX BANDS (ĐAI TRÁM NHỰA)

MÔ TẢ CHUNG

Chất liệu nhựa trong suốt.



 **Trung Quốc**

Mã: SC0601L - SC0602S

Đóng gói: 50 cái/hộp


385.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BỘ KIT MATRIX

MÔ TẢ CHUNG

Tên	Số lượng
Kẹp nha khoa	1 cái
Matrix trên nướu	L(50 cái), M(50 cái), S(50 cái)
Matrix trên dưới nướu	L(20cái), M(20cái), S(20cái)
Matrix nhựa dây đeo	L(10 cái), S(10 cái)
Thanh dính	3 cái
Nệm khe hở silicon	6 cái
Nệm	60 cái
Vòng kẹp	6 cái

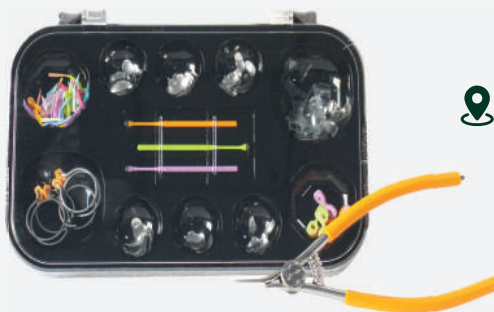

 **Trung Quốc**

Mã: SC01

Đóng gói: 1 cái/hộp

3.500.000Đ/BỘ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

COMPOSITE ENA HRI

Composite duy nhất trên thế giới có chỉ số khúc xạ 1.62 tương đương với chỉ số khúc xạ của men răng tự nhiên

SẴN RA MẮT


Italy

ENAMEL HRI UNIVERSAL

(Composite màu men)

Giống như tự nhiên... Màu men Ena HRI hoạt động như men con người

Đóng gói: 5g/ tuýp
Gồm các màu: UE1, UE2, UE3

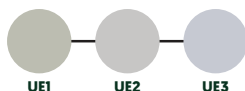

Mã: EHRUE

ENA HRI ENAMEL	ĐẶC TÍNH QUANG HỌC MEN	ĐỐI TƯỢNG
UE3	Men giá trị cao	Dùng cho trẻ em và tẩy trắng răng
UE2	Giá trị trung bình	Bệnh nhân trung niên
UE1	Giá trị thấp	Bệnh nhân lớn tuổi

ENAMEL PLUS HRI DENTINE

(Composite màu ngà)

Ena HRI có mức độ mờ đục và phát huỳnh quang gần với ngà răng tự nhiên nhất

Đóng gói: 5g/ tuýp
Gồm các màu: UD1, UD2, UD3, UD3.5, UD4



Mã: EHRUD

BỘ KIT TRÁM LAYER TECHNIQUE



Đóng gói: 6 tuýp
- 2 tuýp màu men: UE1, UE2
- 4 tuýp màu ngà UD1234
Mỗi tuýp 2,5g

ENA HRI MINI KIT



Đóng gói:
- 1 tuýp màu men (UE2).
- 4 tuýp màu ngà UD1234
Mỗi tuýp 2,5g

BỘ KIT ĐÁNH BÓNG

Cung cấp giải pháp toàn diện cho việc hoàn thiện và đánh bóng các phục hình thẩm mỹ trực tiếp



Đóng gói: Keo đánh bóng, Keo nhôm oxit, Lớp bảo vệ không khí, Cọ và ni đánh bóng...

Mã: ES-Y+G

BỘ KIT BOND SE

Keo dán hai chai thể hệ IV. Sử dụng Ena Bond làm lớp lót và Ena Seal làm lớp thứ hai cho kết quả bám dính tốt.



Đóng gói: Ena Bond SE Primer; Ena Bond SE Light curing resin mỗi chai 5ml

Mã: CFOTX


MICERIUM

COMPOSITE ĐẦU TIÊN CHO VÙNG THẨM MỸ TÁI TẠO MÀU SẮC RĂNG TỰ NHIÊN

COMPOSITE DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
 Có chỉ số khúc xạ 1.62 tương đương
 chỉ số khúc xạ của men răng tự nhiên




"Glass Effect" lowers the value of the restoration with a gray halo on the margin (dark line)

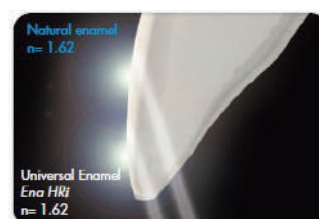


Invisible margins, reproducing with Hri the same thickness of the natural enamel

BIỂU ĐỒ SO SÁNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ

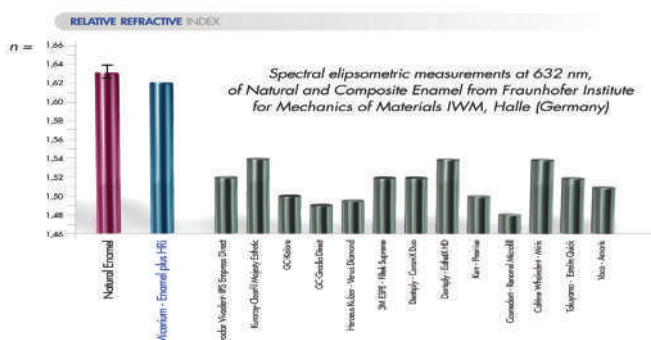

BẢNG SO SÁNH BỘ KIT TRÁM MICERIUM

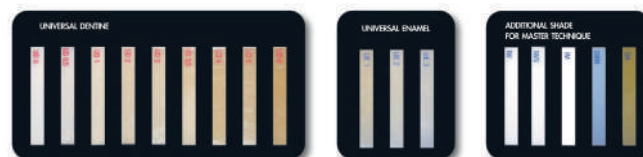

CÁC TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG




KỸ THUẬT TRẮNG MEN: ENA HRI ENAMEL



KỸ THUẬT NÂNG CAO - PHỤC HỒI PHỨC TẠP



KỸ THUẬT CƠ BẢN: ENA HRI ENAMEL + DENTINE

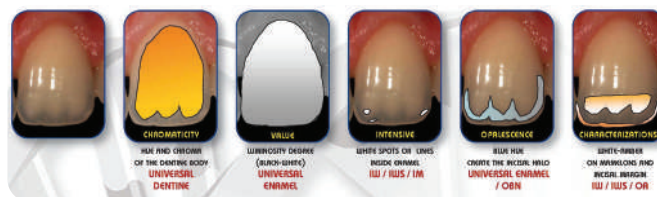

5 CHIỀU MÀU SẮC CỦA RĂNG THEO DR LORENZO VANINI

TÂY TRẮNG TẠI PHÒNG W-GEL

 Hàn Quốc



Quét mã QR để xem HDSD



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

- Nồng độ: 35%
- Dùng cho 10 bệnh nhân
- Hạn chế ê buốt, gây phỏng nướu
- Thời gian thực hiện: 12 phút * 3 lần
- Bảo quản: ngăn mát tủ lạnh

Mã: 402-1

Đóng gói: 2 tuýp gel x 5ml + 10 ống activator

- Lên màu trắng trong tự nhiên, không bị quá trắng như các loại khác
- Không gây khô men sau khi tẩy trắng

 **MUA 1 BỘ
TẶNG 5**
TUÝP CHE Nướu

MUA 5 TẶNG 1 | MUA 10 TẶNG 3

MUA 20 TẶNG 8 | MUA 50 TẶNG 25

2.250.000Đ/BỘ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CHE Nướu DENTTO DAM

 Hàn Quốc

- Đóng gói: 1.2ml
- Bảo quản: ngăn mát tủ lạnh



Mã: 402-1

 **MUA 5
TẶNG 1**

650.000Đ/BỘ/5 TUÝP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

ỐNG NƯỚC TÂY TRẮNG ACTIVATOR

 Hàn Quốc

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- H2O2 35% được dùng để trộn đều với Gel tẩy trắng
- Hoạt động bằng cách oxy hóa các sắc tố gây xỉn màu trên răng, làm cho răng trở nên trắng sáng hơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lấy 1 ống nước trộn đều với Gel dùng cho 1 bệnh nhân



Mã: T_WGEL_ACT

50.000Đ/CHAI

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

	BT COOL PLUS	BT COOL EASY
	📍 Đài Loan	
	 Vùng chiếu đèn rộng và hình cung: Phạm vi tẩy trắng toàn bộ vòm miệng	 Vùng chiếu đèn rộng và hình cung: Chiếu tẩy trắng toàn bộ cung răng
Đặc điểm nổi bật	- Thiết kế sang trọng - Tích hợp nhiều chế độ, đa dạng thuốc tẩy trắng - Màn hình LED dễ cài đặt - Đầu đèn xoay 360°	- Gọn nhẹ, dễ thao tác, cánh tay linh hoạt - Chế độ hẹn giờ (5-25 phút) - Vận hành êm, sử dụng đến 20,000 giờ - Bộ nhớ trong tự động lưu cài đặt
Thông số kỹ thuật	- Nguồn sáng: đèn LED xanh 3W (x4 bóng) - Dải quang phổ: 430~490nm - Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60 Hz - Kích thước: 140cm * 150cm - Trọng lượng: 19.5 kg	- Nguồn sáng: đèn LED xanh 3W (x3 bóng) - Dải quang phổ: 430 ~ 490nm - Nguồn điện: AC 100 ~ 240v, 50/60Hz - Kích thước: 90cm * 120cm - Trọng lượng: 4.2 kg
Mã sản phẩm	DENLED_ABTPL	DENLED_ABTEA
Bảo hành	12 THÁNG	
Chương trình khuyến mãi	• MUA 1 ĐÈN – TẶNG 4 TẨY TRẮNG W-GEL • MUA 28 TẨY TRẮNG W-GEL – TẶNG 1 ĐÈN	• MUA 1 ĐÈN – TẶNG 2 TẨY TRẮNG W-GEL • MUA 14 TẨY TRẮNG W-GEL – TẶNG 1 ĐÈN
Giá bán	32.000.000Đ Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay	12.500.000Đ Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

GEL HỖ TRỢ LÀNH THƯƠNG

ORAL GEL BLUE M

 Hà Lan

CÔNG DỤNG

Blue'm oral gel tăng tốc độ lành thương các trường hợp:

- Viêm quanh chân Implant
- Lành thương nhanh chóng sau khi đặt Implant
- Viêm nha chu
- Vết thương hở miệng (sau khi nhổ răng, hóa trị/xạ trị)
- Chảy máu hoặc viêm nướu

THÀNH PHẦN

Nước, Rượu, Glycerin, Silica, Natri Saccharin, Natri Perborate, Axit Citric, PEG-32, Sodium Gluconate, Lactoferrin, Xanthan Gum, Cellulose Gum

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Làm sạch vùng bôi
- 2 Bơm gel trực tiếp vào vị trí điều trị
- 3 Súc miệng hoặc nuốt sau khi dùng (không quá 1 giờ)
- 4 Dùng tối đa 3 lần/ngày sau khi đánh răng
- 5 Kết hợp nước súc miệng theo chỉ định nha sĩ



Đóng gói: 15 ml

**MUA 5
TẶNG 1**

Mã: OG15

500.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ KHI ĐIỀU TRỊ BỆNH NHA CHU



Trước điều trị



Sau điều trị

GĂNG TAY SAFARI

 **Malaysia**

MÔ TẢ CHUNG

- Mỏng, ít bột, siêu dai
- Kích thước: XS, S, M
- Mã:
 - SFR 81225-LTX-P (XS)
 - SFR 81226-LTX-P (S)
 - SFR 81227-LTX-P (M)



**Đóng gói: 50 đôi/hộp
10 hộp/thùng**

Theo thời giá

ỐNG HÚT NƯỚC BỘT MÀU XANH

 **Trung Quốc**

MÔ TẢ CHUNG

- PVC dẻo, êm, giảm chạm mô
- Đường kính bên trong 5,3mm
- Kích thước: 150 x 6,5mm



Mã: SE01

Đóng gói: Túi 100 cái, 20 túi/thùng

MUA 10 TẶNG 3 | MUA 20 TẶNG 10 | MUA 50 TẶNG 35

1.650.000đ/thùng

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CÂY DÁN INLAY (QUE DÍNH)

MÔ TẢ CHUNG

440*440*250mm

📍 Trung Quốc



Mã: SC08
Đóng gói: 20 cái/hộp

103.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MA01F MA01R MA01SF

CỌ BÔI

Chiều dài: 10cm

Đóng gói: 4 hộp nhỏ/1 hộp lớn (100 que/1 hộp nhỏ)

Cam: 1.0mm

Vàng: 1.5mm

Xanh lá: 2.0mm



155.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BF03B

SÚNG BẮN COMPOSITE



Súng được dùng để bơm composite lỏng dạng nhộng vào xoang trám.

Size: 150*100mm

Đóng gói: 1 cái/hộp

CG01

90.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

SEIL-SSP

CAO SU ĐẶC SMARTSIL PUTTY SET

Chính xác - Sắc nét - Tinh tế

♀ Hàn Quốc



Đóng gói: 500g x 2

819.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MUA 5 TẶNG 1
MUA 20 TẶNG 8 | TẶNG THÊM 7 HỘP CAO SU LỎNG
MUA 10 TẶNG 2 | TẶNG THÊM 3 HỘP CAO SU LỎNG
SEIL-SSLB

CAO SU LỎNG SMARTSIL LIGHT BODY

Chính xác - Sắc nét - Tinh tế

♀ Hàn Quốc


 Đóng gói: 50ml đi kèm
5 đầu trộn và 3 đầu bơm

220.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MUA 5 TẶNG 1
MUA 10 TẶNG 3
SEIL-SSLBR

CAO SU LẤY DẤU KHỚP CẢN

- Độ kết dính tốt, ổn định cao

♀ Hàn Quốc


 Đóng gói:
50ml đi kèm 3 đầu trộn

305.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MUA 5 TẶNG 1
MUA 10 TẶNG 4
IOT02

ĐẦU BƠM

 - Kết hợp với đầu trộn cao su lỏng
tỷ lệ 1:1
- Size: 24.2 * 4.2mm

♀ Trung Quốc



Đóng gói: 100 cái/ túi

103.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

HP03C

ĐẦU TRỘN CAO SU LỎNG

 - Đầu trộn cao su lỏng lấy dấu loại
bơm súng, tỉ lệ trộn 1:1, dùng kèm với
đầu vòi bơm cao su Oral Tip.

♀ Trung Quốc



Đóng gói: 50 cái/ túi

175.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

SDG01

SÚNG CAO SU LỎNG SILICONE DISPENSER GUN

Tỷ lệ: 1:1 và 1:10

♀ Trung Quốc


550.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MP01

CỤC CẢN

- Chịu nhiệt độ cao 121°C
- Kích thước:
L: 39.5*39.5*20.4mm (tím)
M: 34.5*36.5*17mm (xanh)
S: 33*28*17mm (vàng)



39.5*39.5*20.4mm

34.5*36.5*17mm

33*28*17mm

Đóng gói: 2 cái/túi
27.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MP02

BANH MÔI & CỤC CẢN

- Nhựa chịu nhiệt độ cao 121°C
- Kích thước:
S: 33*28*17mm
M: 34.5*36.5*17mm
L: 39.5*39.5*20.4mm
(S): vàng | (M): xanh | (L): tím


Đóng gói: 12 cái/hộp
845.000Đ/HỘP

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

PB02C

CHÈM GỖ

Nệm gỗ tròn êm, bảo vệ nướu, 6 kích cỡ.

- Màu cam: 1.3*1.5*11mm
- Màu trắng: 1.5*1.5*14mm
- Màu xanh lá cây: 1.5*1.5*14mm
- Màu vàng: 1.5*1.5*16mm
- Màu xanh: 1.5*2.0*14mm
- Màu hồng: 1.5*2.0*16mm

 **Trung Quốc**

Đóng gói: 100 cái/hộp
120.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

**PW01L
PW01M**
**PW01S
PW01SS**

CHÈM NHỰA

- Ôm sát răng, cố định matrix, tách kẽ tốt.

- L: 17,8*2,8mm (tím)
- M: 17,8*2,45mm (vàng)
- S: 17,8*2,1mm (xanh lá)
- SS: 17,8*1,7mm (xanh dương)

 **Trung Quốc**

Đóng gói: 1 lọ/100c
70.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

FF04

MẶT NẠ BẢO HỘ

- Chống mờ, êm, cố định chắc chắn

Trung Quốc



MUA 10 TẶNG 5 | MUA 20 TẶNG 15

Đóng gói: 1 cái/hộp

21.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

FF05

BỘ CHE MẶT BẰNG NHỰA

- Màu: Xanh/Tím
- Chống bắn nước, chống chói, chống mờ
- Đàn hồi tốt

Trung Quốc



Size: 24x16,5cm

MUA 5 TẶNG 1 | 10 TẶNG 5 | 20 TẶNG 15

Đóng gói: 1 bộ gồm
1 khung đeo và 10 tấm che

120.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

SG01

KÍNH BẢO HỘ

- Màu: Đỏ/ Trong suốt
- Bảo vệ mắt, ngăn ngừa dịch, giọt nước và máu

Trung Quốc



Size: 520*350*370mm

MUA 2 TẶNG 1

Đóng gói: 1 cái/hộp

52.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CR02S/M
CR02L

BANH MÔI

- Bền, dẻo, hấp tiệt trùng 134°C,
giữ há miệng ổn định



L: 132*90*17mm



M: 118*85*17mm



S: 97x70x15mm

Đóng gói: 2 cái/hộp

22.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay


CR01S
CR01L

BANH MÔI CHỮ T

- Dễ cầm nắm, banh miệng an toàn



(S)114*42*17mm

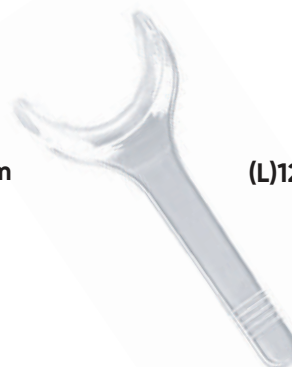

(L)120*53.5*18mm

Đóng gói: 1 cái/hộp

22.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CR09S
CR09M

BANH MÔI

- Bền, dẻo, hấp tiệt trùng 134oC, giữ há miệng ổn định

(S): 97*70*15mm | (M): 118*85*17mm



Đóng gói: 2 cái/hộp

53.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BT01 BT02 BT03 BT04 BT05

KHAY LẤY DẦU KHỚP CẦN

- Thiết kế đơn giản, lấy khuôn chính xác
- BT01: 520*350*375mm
- BT02: 460*350*260mm
- BT03: 430*430*290mm
- BT04: 420*270*230mm
- BT05: 280*225*225mm

Size: 24x16,5cm



Đóng gói: 20 cái/túi

83.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

IG0601 IG0603 IG0605 IG0607
IG0602 IG0604 IG0606

KHAY LẤY DẦU IMPLANT

- Nhựa bền, có 18 tấm hình quạt có thể tháo lắp nhanh chóng, lấy khuôn chính xác



Đóng gói: 6 cái/túi

83.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

ITO201 ITO203 ITO205 ITO207 ITO209
ITO202 ITO204 ITO206 ITO208 ITO210

KHAY LẤY DẦU

- Kết hợp độ ổn định của thép không gỉ và khả năng tạo hình linh hoạt của nhựa dẻo
- Định hình chuẩn xác và có thể tái sử dụng



Đóng gói: 10 cái/túi

52.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

ĐÀI CAO SU ĐÁNH BÓNG

Đóng gói: 100 cái/hộp

HÌNH ẢNH	HÌNH DẠNG	CỨNG	MỀM	GIÁ
	Ô	PC02A	PC02B	365.000đ
	8 mạng	PC04A	PC04B	365.000Đ
	6 mạng	PC01A	PC01B	255.000Đ
	Gân	PC03A	PC03B	365.000Đ

SÒ ĐÁNH BÓNG

Đóng gói: 50 cái/hộp

HÌNH ẢNH	HÌNH DẠNG	MEDIUM	FINE	GIÁ
	Dạng kem	PC05M		195.000Đ
			PC05F	175.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MŨI ĐÁNH BÓNG

Đóng gói: 100 cái/hộp

HÌNH ẢNH	HÌNH DẠNG		CỨNG	MỀM	GIÁ
	Đầu chổi	Thân			
	Dạng phẳng 5.5mm	21.6mm	PB02A	PB02B	255.000Đ
	Hình móc, mềm mại 5.5mm	22.8mm	PB01A	PB01B	455.000Đ
	Dạng thuôn 7.5mm	21.6mm		PB03B	255.000Đ
	Lông 5.5mm	22.8mm	PB01C		540.000Đ
	Lông 5.5mm	21.6mm	PB02C		365.000Đ
	Lông 7.5mm	21.6mm	PB03C		365.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

MB02

MB03

CHÉN TRỘN

- chất liệu: Dũa dẻo PVC



Mã	Kích thước	Dung tích
MB02	108*59mm	280ml
MB03	84*50mm	150ml

31.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

SP01

THÌA TRỘN

Đóng gói: 1 cái/túi

Size: 520*350*370mm



12.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

TB01

KHAY ĐỔ THẠCH CAO

- Dụng cụ hỗ trợ đổ đế mẫu hàm toàn hàm
- Chất liệu: Silicon dày
- Dễ sử dụng, dễ tháo gỡ
- 81*60*28mm



Đóng gói: 6 cái/hộp

160.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

AL01

ĐÈN CỒN

Có độ dày chắc chắn




Đóng gói: 1 cái/hộp

55.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

TH02L TH02S

KỆ ĐỰNG NHA KHOA

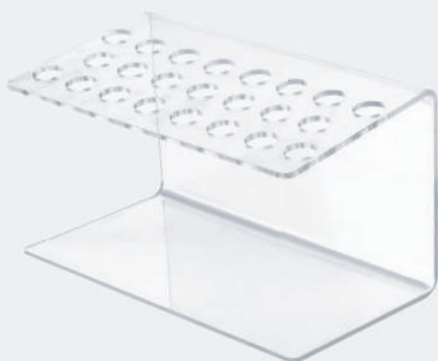

Đóng gói: 1 cái/hộp

102*108*130mm

203*108*130mm

TH02S: **262.000đ**

TH02L: **392.000đ**

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

GD01

LY ĐÁNH THUỐC

Màu sắc: Trắng, Xanh lam, Xanh lục, Hổ phách



Đóng gói: 12 cái/hộp

250.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

CD02
CD03

HỘP ĐỰNG GÒN

- Dễ dàng sử dụng, ổn định, chống trượt, và dễ vệ sinh

Size: 120*55*97mm
108*53*102mm



Đóng gói: 1 cái/hộp

83.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

BB03

BB09

HỘP ĐỰNG MŨI KHOAN

- Nhựa ABS, chống bụi
- Nhẹ, bền và chắc chắn, có thể đặt mũi khoan tốc độ cao và mũi khoan tốc độ thấp
- Nắp trong suốt nhìn rõ chiếc kim bên trong


- Số lượng 166 lỗ
- Size: 390*390*370



Đóng gói: 1 cái/hộp

45.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

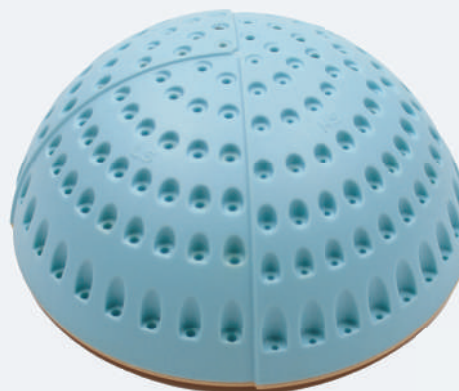

Đóng gói: 1 cái/hộp

103.000Đ

Ký hợp đồng – Giá ưu đãi áp dụng ngay

Mã	Kích thước	Số lượng
BB03	480*390*320mm	60 lỗ
BB09	390*390*370mm	166 lỗ



Everything for Your dental practice

Giải pháp toàn diện trong ngành Răng - Hàm - Mặt

Scan để biết thêm
thông tin



 0906.928.369

 saleshcm@tinnha.vn

 tinnha.vn